Теплообменник Portex"Thermovent" T2 (HME)

Предоставление четкого выбора



Термовентилятор T2 HME

> Стерильный одноразовый HME

> Обеспечивает эффективное увлажнение для пациентов со спонтанным дыханием, верхние дыхательные пути которых перекрыты трахеостомией или трахеальной трубкой.

> Устройство можно использовать до 24 часов.

> Отверстие для подачи дополнительного кислорода и отверстие для удаления выделений путем отсасывания.

Показания к применению

> Для применения у взрослых и детей с приливным объемом более 70 мл

> Уменьшение теплопотерь через бронхо-легочное дерево

> Помогает предотвратить сгущение секрета и изменения функции легких

> Подача дополнительного кислорода при необходимости

> Облегчение удаления выделений

> Сохранение влажности и сведение к минимуму повреждения эпителиальных клеток трахеи

Технические характеристики Thermovent T2 HME

Скорость потока кислорода/концентрация вдыхаемого кислорода

Расход л/мин	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
O_2 %	27	33	37	42	45	47	53	54	57	60

Выход влаги: 25 мгл-1 H2O при 15 вдохах/мин, приливной объем 500 мл

Сопротивление течению

0,3 ГПа (см H20) при расходе газа 0,5л сек-1 (30 л мин-1) [0,6 см H20 л-1 сек-1]
0,7 ГПа (см H20) при расходе газа 1,0л сек-1 (60 л мин-1) [0,7 см H20 л-1 сек-1]
1,2 ГПа (см H20) при расходе газа 1,5л сек-1 (90 л мин-1) [0,9 см H20 л-1 сек-1]

Объем: 11 мл

Диапазон приливного объема: 70-500 мл



Thermovent T2 имеет встроенные всасывающие и кислородные отверстия.

Использование Thermovent T2 HME с трахеостомической трубкой



При установке на 15-миллиметровый разъем трахеостомической трубки устройство должно быть ориентировано так, чтобы кислородный порт находился на его нижней стороне.



Всасывающее отверстие должно оставаться закрытым, когда оно не используется.



Если требуется отсасывание, откройте дверцу всасывающего отверстия, чтобы можно было ввести отсасывающий катетер.



Вставьте всасывающий катетер и начните отсасывание. Следите за тем, чтобы выделения не попали на дверцу отверстия.




По завершении отсасывания извлеките отсасывающий катетер и закройте дверцу отсасывающего отверстия.




Если требуется дополнительный кислород, кислородопровод может быть подключен к подходящему источнику кислорода.



Подачу кислорода следует регулировать в соответствии с требованиями пациента.

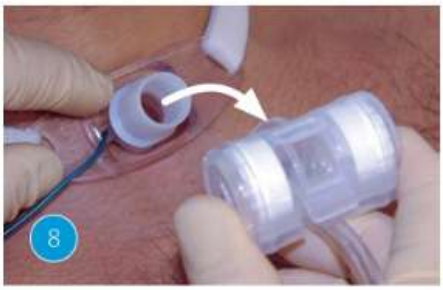

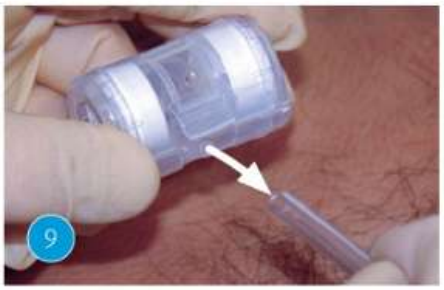

Устройство Thermovent T2 следует извлечь из трахеостомической трубки перед отсоединением кислородной линии, чтобы избежать риска деканюляции.